



GROUPE

Airel Quetin

POUR UN ÉQUIPEMENT DENTAIRE ADAPTÉ

Distributeur secteur Normandie
Idem dentaire
3 rue aux juifs 14000 CAEN
tel : 09.50.18.47.00 fax : 09.55.18.47.00
mail : contacts@idem-dentaire.fr
<http://www.idem-dentaire.fr>

idem dentaire

Nouveau



PE9

En continuité du PE7 et du PE8, conçus et approuvés depuis plus de 20 ans, Quetin sort aujourd'hui le fauteuil PE9, la référence en terme de confort et d'ergonomie pour le dentiste et le patient.

Le PE9 a été re-designé pour convenir à tous les dentistes. Ses nombreuses fonctionnalités en font un unit universel.



L'équipement dentaire universel



Tête triple articulation
avec système
de blocage pneumatique

Support aspiration et crachoir
en fixation ambidextre

NEW Large dossier très fin
avec accoudoirs intégrés

Nouvel écran tactile
haute définition

NEW

Base du fauteuil plus fine
intégrant le système IGN et
un séparateur amalgame

NEW



Support aspiration incluant
un clavier de commande
et 1 filtre pour chaque
canule d'aspiration

Grande longueur de cordons avec
une amplitude latérale maximale


Fauteuil en position
Trendelenburg

NEW

Le bras d'unit est fixé à la base du
fauteuil en position ambidextre

NEW

Nouvel écran tactile haute définition

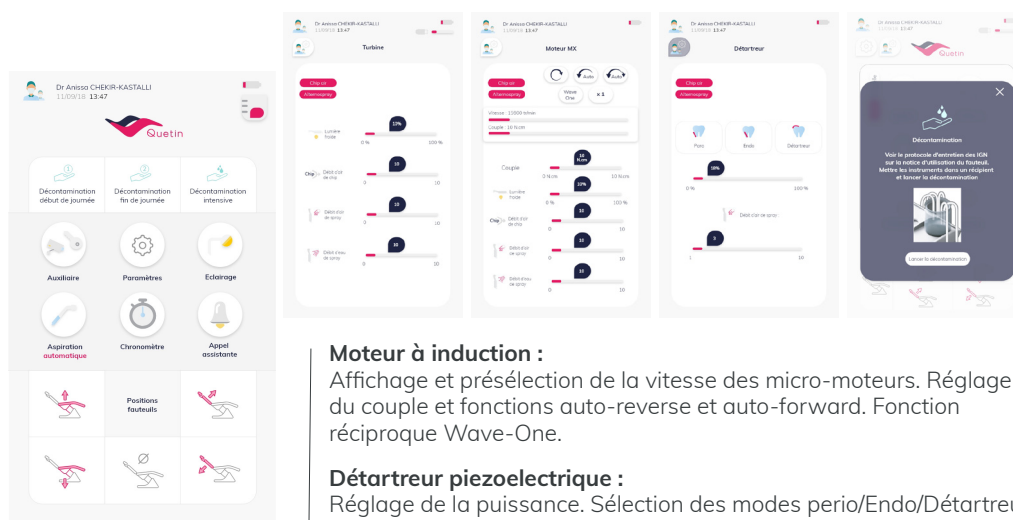

Menu d'accueil

Moteur à induction :

Affichage et présélection de la vitesse des micro-moteurs. Réglage du couple et fonctions auto-reverse et auto-forward. Fonction réciproque Wave-One.

Détartreur piezoelectrique :

Réglage de la puissance. Sélection des modes perio/Endo/Détartreur

Turbine Led :

Réglage de l'intensité de la lumière, réglage des débits d'eau et des sprays.

Avantages



Décontamination
automatique grâce au
système IGN
(préventive et curative)



Configuration multi
utilisateurs pour tous les
paramètres par clé USB



De nombreuses marques
d'instruments disponibles



Ecran tactile 7 pouces
haute résolution,
parfaitement résistant



Pédale sans fil

GROUP
Airel Quetin

917 Rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne | France
Tel. : +33 1 48 82 22 22 | office@airel.com
www.airel-quetin.com

Dispositif médical : Class IIa - Organisme notifié : SZUTEST (2195)
Fabricant : Airel, France | February 2019.
Pour toute information, se référer à la notice d'utilisation



FABRIQUÉ EN
FRANCE





PE9

Evo.2

FAUTEUIL

PRIX TTC France TVA 20%

- En deux parties, articulation compensée du dossier
- **Position de Trendelenburg synchronisée avec le dossier.**
- 2 mouvements, avec programmation (4 programmes et retour crachoir)
- Triple articulation (**mouvement lateral**) à assistance et blocage pneumatique

UNIT

sur balanciers fauteuil, cordons pendants fauteuil, CART mobile ou mural WM)

- Tablette porte-instruments sur bras fixe et bras compensé fixés sous le fauteuil en position ambidextre, lui permettant d'être parfaitement positionnée quelle que soit la position de travail.
- Ecran de commande **couleur tactile 7 pouces** haute définition situé sur la tablette et pilotant les différentes fonctions (fauteuil, programmation moteurs, débit des sprays, éclairage, instruments...). **Clé USB de mémorisation des réglages pour un travail multi-praticiens.**
- Livré avec :
 - 1 kit seringue multifonctions **LUZZANI**
 - 1 kit cordon pneumatique lumière
 - 1 kit micro-moteur électrique 40.000 tr/min à **INDUCTION BIEN AIR MX2 LED** 1 kit
 - détartreur piézoélectrique **SATELEC NEWTRON LED** ou **EMS NO-PAIN LED**

PEDALE de commande sans fils

- Pédale progressive unique pour tous les instruments dynamiques, activation Chip Air et Chip Eau, sélection et activation des sprays. Alternospray pour travailler avec une excellente vision du champ opératoire.
- Programme et commande les mouvements du **fauteuil**, de la **position crachoir** et de la dernière position de travail.

SUPPORT ASPIRATION

- Sur double bras articulé : fixé à l'arrière du fauteuil **en position ambidextre** livré avec 2 tuyaux à **sélection indépendante et décontamination interne intégrée**. Tablette cervicale plateau d'instrumentation 18x28 cm.

KIT HYGIENE

- **IGN®** Système de décontamination de l'eau des sprays utilisant du CALBENIUM®
- **CALBEPULS®** Système de décontamination externe des instruments
- **ASPISEPT®** Système de décontamination des tuyaux d'aspiration

L'ensemble OFFRE ADF 2019 à partir de :

25 390 €

OPTIONS

KIT MICRO-MOTEUR BIEN AIR MX2 LED supplémentaire (max 2) **2 300 €**
CRACHOIR avec rotation de 180° autour du dossier cuvette en verre amovible **KIT 1 510 €**
LAMPE A POLYMERISER SATELEC MINI L.E.D. **1 520 €**
VANNE DE CRACHOIR DURR DENTAL **830 €**
RECUPERATEUR D'AMALGAMES DURR DENTAL CAS1 ou METASYS MST1 ECLAIRAGE A **2 350 €**
TECHNOLOGIE LEDS GCOMM IRIS sur colonne plafonnrière **2 700 €**
KIT VISIO CAMERA SOPRO 617 avec support écran et écran vidéo 17" CAMERA de **4 430 €**
vidéosurveillance visible sur l'écran de l'unit **800 €**

ces offres sont valables exclusivement chez Idem dentaire sur la région Normandie et jusqu'au 29 décembre 2019.



PE9
Neo.2

FAUTEUIL

PRIX TTC France TVA 20%

- En deux parties, articulation compensée du dossier
- 2 mouvements, avec programmation (4 programmes et retour crachoir)

TETIERE

- Triple articulation (**mouvement lateral**) à assistance et blocage pneumatique

UNIT

sur balanciers fauteuil, cordons pendants fauteuil, CART mobile ou mural WM)

- Tablette porte-instruments sur bras fixe et bras compensé fixés sous le fauteuil en position ambidextre, lui permettant d'être parfaitement positionnée quelle que soit la position de travail.
- **Ecran de commande tactile** situé sur la tablette et pilotant les différentes fonctions (fauteuil, programmation moteurs, débit des sprays, éclairage, instruments...). Carte de mémorisation des réglages pour un travail multi-praticiens.
- Livré avec :
 - 1 kit seringue multifonctions **LUZZANI**
 - 1 kit cordon pneumatique lumière
 - 1 kit micro-moteur électrique 40.000 tr/min **BIEN AIR MCX LED** fibré 1 kit
 - détartreur piézoélectrique **SATELEC NEWTRON** ou **EMS NO-PAIN**

PEDALE de commande sans fils

- Progressive unique pour **tous les instruments dynamiques**, activation Chip Air et Chip Eau, sélection et activation des sprays. Alternospray pour travailler avec une excellente vision du champ opératoire.
- Programme et commande les mouvements du **fauteuil**, de la **position crachoir** et de la dernière position de travail.

CRACHOIR

- Sur double bras articulé fixé à l'arrière du fauteuil **en position ambidextre**.
- Cuvette en verre amovible, remplissage du verre temporisé

SUPPORT ASPIRATION

- Sur double bras articulé : fixé à l'arrière du fauteuil **en position ambidextre** livré avec 2 tuyaux à **sélection indépendante et décontamination interne intégrée**. Tablette cervicale plateau d'instrumentation 18x28 cm.

KIT HYGIENE

- **IGN®** système de décontamination de l'eau des sprays utilisant du **CALBENIUM®**
- **CALBEPULS®** système de décontamination externe des instruments
- **ASPISEPT®** système de décontamination des tuyaux d'aspiration

L'ensemble OFFRE ADF 2019 à partir de :

22 790 €

OPTIONS

KIT MICRO-MOTEUR BIEN AIR MCX LED supplémentaire (max 2)	2 080 €
SUPPLEMENT pour MICRO-MOTEUR à INDUCTION BIEN AIR MX2 LED à la place du MCX KIT	830 €
MICRO-MOTEUR BIEN AIR MX2 LED supplémentaire (max 2)	2 260 €
SUPPLEMENT lumière LED sur DETARTREUR	410 €
KIT LAMPE A POLYMERISER SATELEC MINI L.E.D.	1 520 €
VANNE DE CRACHOIR DURR DENTAL	830 €
RECUPERATEUR D'AMALGAMES DURR DENTAL CAS1 ou METASYS MST1	2 350 €
ECLAIRAGE A TECHNOLOGIE LEDS GCOMM IRIS sur colonne plafonnrière	2 700 €
POSITION DE TRENDLEMBURG SUR FAUTEUIL PE9 NEO.2 NOUVEAU	230 €
KIT VISIO CAMERA SOPRO 617 avec support écran et écran vidéo 17"	4 430 €

ces offres sont valables exclusivement chez Idem dentaire pour la région Normandie et jusqu'au 29 décembre 2019.