

LES OFFRES
SEREINES⁽¹⁾

La garantie d'une
désinfection intégrale



**SYSTÈME
IGN**⁽²⁾
INCLUS DANS
TOUS NOS
FAUTEUILS

LE NOCOSPRAY⁽³⁾ OFFERT !

⁽¹⁾ Offres valables exclusivement chez Idem dentaire jusqu'au 31 décembre 2020 pour les départements 14 - 50 - 61 - 27 - 76.

⁽²⁾ IGN[®] : Système de décontamination de l'unit et de l'eau des sprays.

⁽³⁾ NOCOSPRAY : Appareil de désinfection des surfaces par voie aérienne 100% automatisé.

www.airel-quetin.com

choisirfrancais@airel.com - 01 48 82 22 22
917, rue Marcel Paul, 94500 Champigny-sur-Marne

www.idem-dentaire.fr

contacts@idem-dentaire.fr - 09 50 18 47 00
3, rue aux juifs, 14000 Caen

FABRIQUÉ EN
FRANCE





AIREL-QUETIN & OXY'PHARM UNISSENT LEUR EXPERTISE...

A l'occasion des offres Sereines, Airel-Quetin vous propose une solution de désinfection complète pour votre cabinet : un NOCOSPRAY offert* pour l'achat d'un équipement dentaire.

Conscient que chaque praticien possède sa propre méthode de travail, Airel-Quetin, seul fabricant français de fauteuils et units dentaires, développe depuis près de 100 ans une gamme d'équipements qui répond aux besoins spécifiques de chaque praticien. Les fauteuils ont ainsi, été conçus spécialement pour s'adapter à tous types d'environnements.

Déjà précurseur dans la décontamination de l'eau des units dentaires, notre ambition est d'aider à lutter efficacement contre toutes formes d'infections liées aux soins.

Le concept IGN-Calbenium est actif contre les bactéries et les virus (y compris le SARS-CoV-2 responsable de la Covid19) de l'eau interne de l'unit dentaire et de l'eau des sprays.

C'est pourquoi, nous nous sommes alliés à l'expertise et au savoir faire d'Oxy'Pharm qui, depuis 2003, garantit un haut niveau de désinfection des surfaces.

Oxy'Pharm conçoit notamment le NOCOSPRAY, un appareil de bio-désinfection des surfaces par voie aérienne, biodégradable à 99.9%, non toxique, non corrosif et sans résidus pour garantir la protection des patients et du personnel. Une solution bactéricide, virucide (y compris le SARS-CoV-2 responsable de la Covid19), fongicide, sporicide, et respectueuse de l'environnement !

*Voir conditions auprès de votre revendeur



UNE DÉSINFECTION **intégrale**



SYSTEME IGN® : DÉCONTAMINATION DE L'EAU

Précurseur dans la décontamination depuis 35 ans et reconnu mondialement, IGN® et CALBENIUM® forment le duo fondamental de la désinfection des units dentaires et du traitement de l'eau des sprays.

L'IGN® est un système de décontamination de l'eau des sprays entièrement automatisé et adaptable à tout équipement dentaire. L'eau à traiter est enrichie en CALBENIUM® sous forme liquide et de façon entièrement automatique.

L'IGN®, associé au produit CALBENIUM®, assure un traitement de l'eau des sprays exempt de germes, évitant ainsi toute contamination post-opératoire ou croisée. Les réservoirs placés sous le crachoir permettent d'accompagner le reset bactériologique de l'unit.



COMPATIBLE
AVEC TOUS
LES UNITS
DENTAIRES

Le CALBENIUM®, produit de décontamination de l'eau des units dentaires utilisé en permanence comme irrigant chirurgical, est fabriqué à partir des produits de qualité « ultrapur » contenant moins de 0,1% d'impuretés. Toutes les qualités du CALBENIUM® se retrouvent aussi dans le CALBENIUM® SPRAY permettant de désinfecter toutes les surfaces du cabinet dentaire, même les plus sensibles.

IGN® CARTRIDGE® a été conçu pour filtrer en continu l'eau des units dentaires en complément du système de décontamination IGN® CALBENIUM®. L'ensemble de la décontamination proposée par Airel-Quetin permet d'atteindre un objectif garanti.



CALBENIUM SPRAY

CALBENIUM

IGN CARTRIDGE

NOCOSPRAY : BIO-DÉSINFECTION DES SURFACES

Le Nocospray est un appareil de bio-désinfection des surfaces par voie aérienne 100% automatisé.

Le Nocospray diffuse un produit désinfectant liquide, le Nocolyse+, sous forme de brouillard sec de peroxyde d'hydrogène sans acide peracétique. Un système automatisé, léger, biodégradable, non-allergène, non-corrodant sur toutes les surfaces (y compris les surfaces électroniques).

Une technologie de diffusion efficace, pour lutter contre les virus, bactéries, levures, moisissures et spores.



EFFICACITÉ

Bactéricide, virucide, sporicide et fongicide.

UTILISATION FACILE

Mode de réglage facile du volume de la pièce à traiter (de 10 à 1 000 m³).

ÉCONOMIQUE

Très faible quantité de produit nécessaire.

GAIN DE TEMPS ASSURÉ

Aucune intervention nécessaire avant le traitement (à l'exception du nettoyage) ou après le traitement (nul besoin d'essuyer ou d'aérer).

DIVERSITÉ DE PRODUITS

Nombreux accessoires et options disponibles.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriqué en France par Oxy'Pharm - Vitesse de sortie du brouillard : 80 m/sec - Poids ≤ 6,2 kg - Débit moyen : 1 000 ml/h - Arrêt automatique - Système de traçabilité des traitements - Taille des particules < 5 µ



LE FAUTEUIL universel

Un design ergonomique, réfléchi et adapté à toutes les positions de travail, de droite comme de gauche, de 2 à 4 mains. Le PE9 est un fauteuil ambidextre par excellence et ses fonctionnalités font de lui un fauteuil universel.

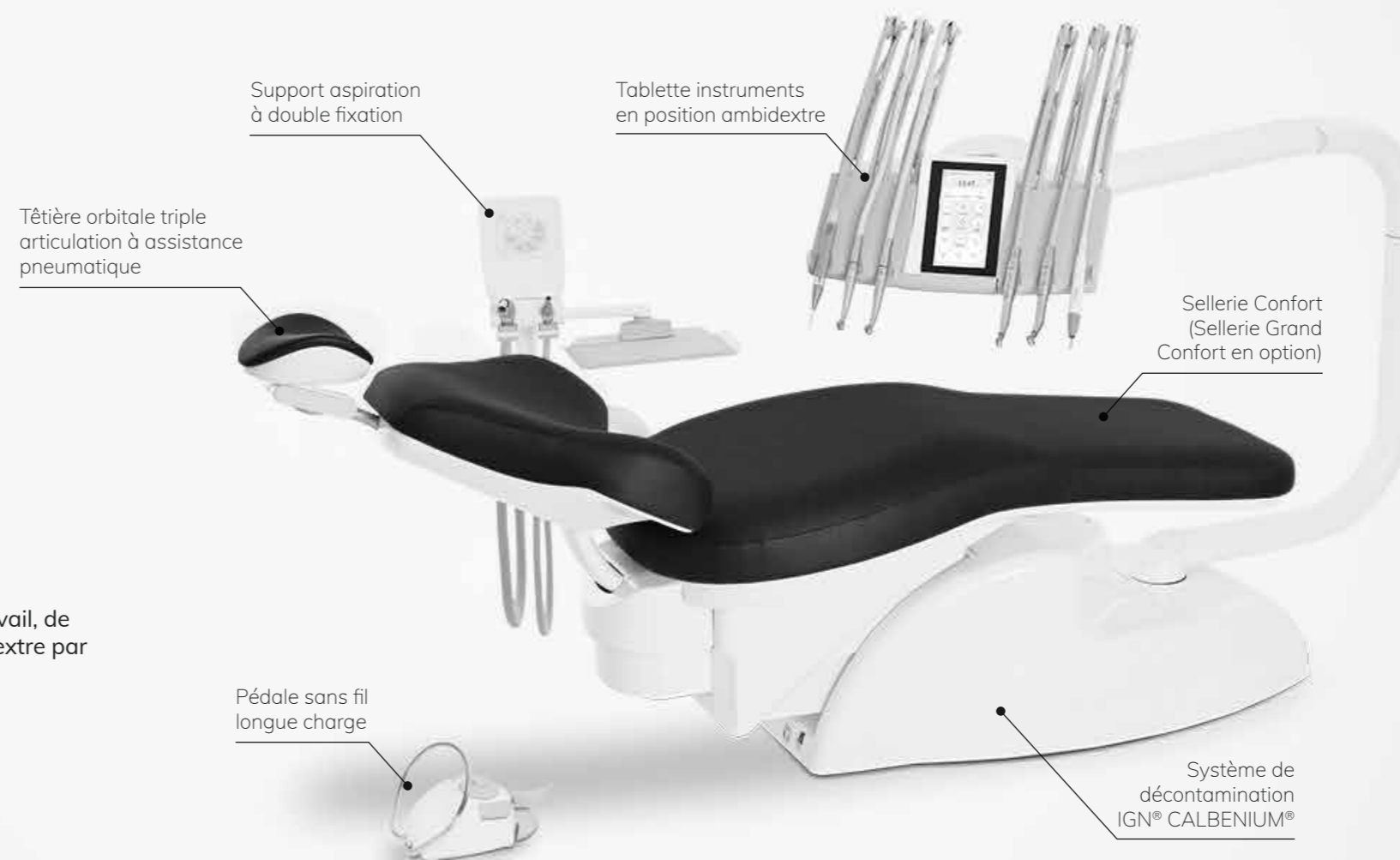

ZOOM SUR LE PE9

FAUTEUIL

Avec programmation (5 positions programmables), tête orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

UNIT

Tablette porte-instruments en position ambidextre et CALBEPULS, écrans **Evo.2** ou **Neo.2** au choix, mémorisation par clé USB pour travail multipraticiens. Livré avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction :
 - **Evo.2** : BIEN AIR MX2 LED
 - **Neo.2** : BIEN AIR MCX LED
- 1 démarreur avec 1 pièce à main et 3 inserts :
 - **Evo.2** : SATELEC NEWTRON LED
 - **Neo.2** : SATELEC NEWTRON

SUPPORT ASPIRATION

En position ambidextre avec 2 canules sélectives, 2 filtres et ASPISEPT.

PEDALE

Sans fil, progressive et unique pour les commandes du fauteuil et des instruments.

KIT HYGIENE

Décontamination de l'eau des sprays IGN® CALBENIUM®.

TABLETTE



Cordons pendants



Cart mobile



Tablette murale

Pour plus d'informations, se référer au tableau des options.

QUEL ÉCRAN CHOISIR ?

PE9
Evo.2

33 210^{€ TTC}
(1) 30 190^{€ TTC}
À partir de
26160€^{ttc} (2)

Cet écran **tactile couleur HD de 7 pouces** à la pointe de la technologie rend le poste de travail **évolutif**.

LES PLUS :

- Mémorisation des programmes par patient et par types de soins
- Technologie évolutive (possibilité d'ajouter de nouveaux instruments, caméra, etc.)
- Sauvegarde de la configuration des périphériques



PE9
Neo.2

28 540^{€ TTC}
(1) 25 690^{€ TTC}
À partir de
22250€^{ttc} (2)

L'écran **tactile rétro-éclairé, monochrome** est facilement nettoyable et pilote les différentes fonctions du fauteuil et des instruments :

- Réglage des instruments, appel assistante, ouverture de porte, etc.
- Mémorisation par clé USB des différents réglages individuels de chaque praticien pour faciliter le transfert vers un autre fauteuil.





LE FAUTEUIL compact

Un fauteuil compact et léger pour un espace de travail aéré et conçu pour une très grande accessibilité du patient ainsi que du praticien et, il s'adapte aux petits espaces !



ZOOM SUR LE K2

FAUTEUIL

Avec programmation (5 positions programmables), tête orbitale triple articulation à assistance pneumatique.

UNIT

Tablette porte-instruments et CALBEPULS, écrans **Evo.2** ou **Neo.2** au choix, mémorisation par clé USB pour travail multipraticiens. Livré avec :

- 1 seringue multifonctions LUZZANI
- 1 cordon pneumatique lumière
- 1 micro-moteur électrique à induction :
 - **Evo.2** : BIEN AIR MX2 LED
 - **Neo.2** : BIEN AIR MCX LED
- 1 détartreur avec 1 pièce à main et 3 inserts :
 - **Evo.2** : SATELEC NEWTRON LED
 - **Neo.2** : SATELEC NEWTRON

SUPPORT ASPIRATION

Avec 2 canules sélectives, 2 filtres et ASPISEPT.

PEDALE

Sans fil, progressive et unique pour les commandes du fauteuil et des instruments.

KIT HYGIENE

Décontamination de l'eau des sprays IGN® CALBENIUM®.

CRACHOIR

Fixé en position ambidextre, orientable avec cuvette en verre amovible.

TABLETTE



Cordons pendants



Cart mobile



Tablette murale

Pour plus d'informations, se référer au tableau des options.

QUEL ÉCRAN CHOISIR ?

k2
Evo.2

31980^{ETTC}
(1) 28960^{ETTC}
A partir de
25160€^{ttc} (2)

Cet écran **tactile couleur HD de 7 pouces** à la pointe de la technologie rend le poste de travail **évolutif**.

LES PLUS :

- Mémorisation des programmes par patient et par types de soins
- Technologie évolutive (possibilité d'ajouter de nouveaux instruments, caméra, etc.)
- Sauvegarde de la configuration des périphériques



k2
Neo.2

26410^{ETTC}
(1) 23560^{ETTC}
A partir de
20400€^{ttc} (2)

L'écran **tactile rétro-éclairé, monochrome** est facilement nettoyable et pilote les différentes fonctions du fauteuil et des instruments :

- Réglage des instruments, appel assistante, ouverture de porte, etc.
- Mémorisation par clé USB des différents réglages individuels de chaque praticien pour faciliter le transfert vers un autre fauteuil.



LES CARTS MOBILES

En version **Cart**, les outils liés au fauteuil jouissent d'une mobilité exemplaire et d'un design alliant modernité et praticité.

Peu encombrant, l'unit se détache du fauteuil tout en conservant ses fonctionnalités et en intégrant tous les instruments d'un unit classique.

Le Cart mobile sur 4 roulettes à double galet est ajustable en hauteur et livré avec une boîte technique. Le Cart peut recevoir 6 instruments sur cordons silicones à sélection automatique.



~~15 190€ TTC~~
11 190€ TTC

LE CART
Neo.2

Commande, programmation et gestion des différentes fonctions par clé USB et écran tactile monochrome.

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
 - 1 pédale de commande progressive latérale pour tous les instruments
 - 1 bouteille d'eau de spray pressurisé
- Livré avec 4 cordons à rappel compensé :
- 1 seringue multifonctions LUZZANI
 - 1 cordon pneumatique lumière
 - 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MCX LED
 - 1 détartreur SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main et 3 inserts



~~11 390€ TTC~~
8 290€ TTC

LE CART
Drive

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
 - 1 pédale de commande pneumatique ronde unique pour tous les instruments
 - 1 bouteille d'eau de spray pressurisé
- Livré avec 4 cordons à rappel compensé :
- 1 seringue multifonctions LUZZANI autoclavable
 - 1 sortie air lumière
 - 1 micro-moteur électrique DASSYM lumière LED
 - 1 détartreur piézoélectrique SATELEC NEWTRON avec 1 pièce à main autoclavable et 3 inserts



~~19 990€ TTC~~
13 850€ TTC

LE CART
Evo.2

Commande, programmation et gestion des différentes fonctions par clé USB et écran tactile couleur HD de 7 pouces.

Fourni avec :

- 2 plateaux d'instrumentation 28x18cm
 - 1 pédale sans fil de commande progressive latérale pour tous les instruments
 - 1 bouteille d'eau de spray pressurisé
- Livré avec 4 cordons à rappel compensé :
- 1 seringue multifonctions LUZZANI
 - 1 cordon pneumatique lumière
 - 1 micro-moteur électrique à induction BIEN AIR MX2 LED
 - 1 détartreur SATELEC NEWTRON LED avec 1 pièce à main et 3 inserts

LES OPTIONS

			PE9		K2	
			EVO.2	NEO.2	EVO.2	NEO.2
	Eclairage à LEDS GCOMM IRIS (au prix du Polaris version unit)	2 090€ TTC	-	-	✓	✓
	Eclairage à LEDS GCOMM IRIS plafond (au prix du Polaris version plafond)	2 340€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Kit caméra de surveillance	690€ TTC	✓	-	✓	-
	Kit Visio Caméra Sopro 617 avec écran vidéo	4 150€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Lampe à polymériser SATELEC MINI LED	1 320€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Micro-moteur BIEN AIR MCX LED supplémentaire	1 800€ TTC	-	✓	-	✓
	Micro-moteur BIEN AIR MX2 supplémentaire	2 000€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Micro-moteur BIEN AIR MX2 à la place de BIEN AIR MCX	720€ TTC	-	✓	-	✓
	Position chaise K2	630€ TTC	-	-	Inclus	✓
	Récupérateur d'amalgames Durr Dental CAS1	2 050€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Récupérateur d'amalgames Metasys MST1	2 050€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Siège opérateur HARLEY	530€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Supplément LEDS sur détartreur SATELEC	360€ TTC	Inclus	✓	Inclus	✓
	Supplément détartreur EMS	OFFERT	✓	✓	✓	✓
	Trendelenburg PE9	200€ TTC	Inclus	✓	-	-
	Vanne de crachoir Durr Dental	720€ TTC	✓	✓	✓	✓
	Crachoir	1 310€ TTC	✓	✓	Inclus	Inclus





Spice
322 8208

Laurel
554 4443

Capri
554 2522

Apfel
107 5041

Scuba
0018

Gris Pailleté
2523

Cave
291 3523

Aspen Green
363 7273

Blood Orange
363 1396

Orange
107 6019

Scarlet
0017

Rouge Pailleté
2526

Raven Wing
291 5607

Battle Ship
363 5011

Sorbet
291 6580

Red
291 1176

Framboise
0104 5002

Pétrole Pailleté
4140

Chrome
0023

Blueberry
554 2711

Baltic
29102551

Améthyste
107 7001

Bleuet
01045014

Bleu Pailleté
2525

White Satin
322 6541

Platinum
550 5744

Glacier
550 2638

Ceramic
0022

Noir
01045011

Noir Pailleté
3073



Dispositif médical : Classe IIa - Organisme notifié : SZUTEST (2195) Fabricant : Airel, France

Pour toute information complémentaire, se référer à la notice d'utilisation
 Offres valables exclusivement chez Idem dentaire jusqu'au 31/12/2020
 pour les départements 14 - 50 - 61 - 27 - 76

